

Careturmer[®]

INNOVATIVE CARE TECHNOLOGY

3 in 1 Lösung

- Patienten automatisch umdrehen
- Verhinderung der Entstehung von Dekubitus
- Optimierung der Verlagerung

Careturmer von GDV Technology




Careturmer wendet Patienten mit Vorsicht an

Careturmer ist ein einzigartiges und innovatives medizinisches Gerät, das die Patienten automatisch neu positioniert und das Pflegepersonal bei der täglichen Verlagerung unterstützt.

Careturmer wendet den Patienten die ganze Nacht über an und sorgt für eine Druckverteilung, um die Entwicklung von Druckgeschwüren zu verhindern.

Careturmer ist für die Arbeitswelt einzelner Pflegekräfte optimiert. Es optimiert die Arbeitsumgebung und spart Ressourcen.

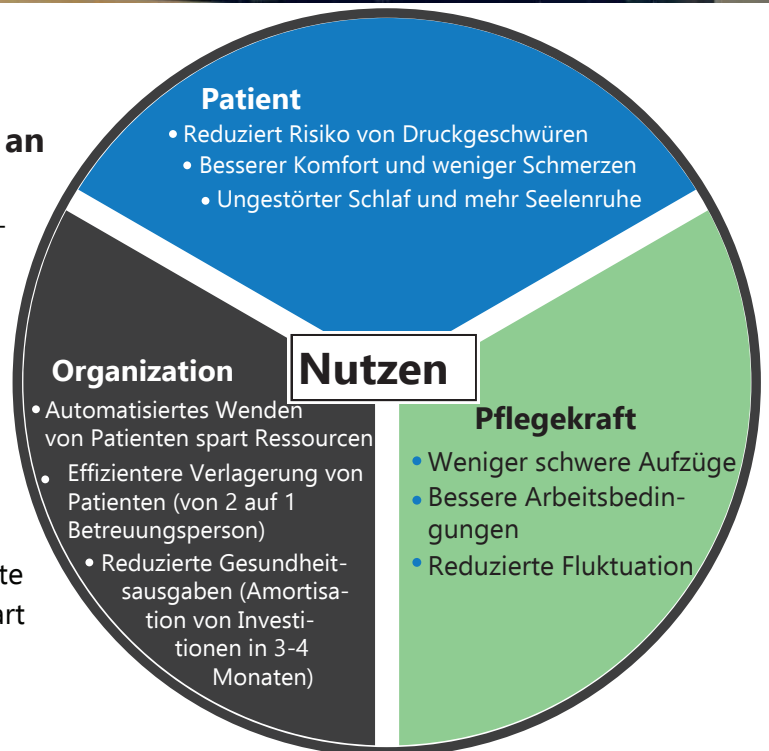

Careturmer passt zu folgenden medizinischen Betten:

- Stiegmeyer Elvido-Movo
- wissner-bosserhoff Sentida
- Invacare SB 755
- Lojer ScanAfia XHS

Weitere Versionen sind in Bearbeitung und können auf Anfrage erstellt werden.



Careturmer dreht den Patienten sanft von einer Seite zur anderen

Careturmer ist einfach auf einem medizinischen Bett zu installieren und arbeitet mit den vorhandenen Bewegungen der Betten zusammen.

- **Manueller Modus:** Mit einem Knopfdruck wird der Endanwender von einer Seite zur anderen geführt, um das Pflegepersonal bei den täglichen Umstell- und Handhabungsvorgängen zu unterstützen. Im manuellen Modus können die Flügel je nach Bettgröße bis zu 80° angehoben werden.

- **Automatischer Modus:** Die Steuerbox verfügt über eine vorprogrammierte Einstellung und Option für zwei zusätzliche Programme, die von der Pflegeperson ausgewählt werden. Careturmer funktioniert sehr leise und ohne Vibration, so dass der Patient ungestört schlafen kann. Im Automatikmodus können die Flügel bis zu 30° angehoben werden.

Careturmer ist TÜV-geprüft und zugelassen mit einem Patientengewicht von bis zu 165 kg.



Careturmer arbeitet in Verbindung mit den vorhandenen Bettenbewegungen



Die programmierbare Steuerbox



Die Seiten können bis zu 60-80° abgewinkelt sein. Der Sling kann von 1 Pfleger benutzt werden



"Hug & Cradle" -Funktion gibt Ruhe und beruhigt den Patienten

Über GDV Technology A/S

GDV Technology A/S ist ein dänischer Hersteller von medizinischen Geräten für immobile Patienten. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet.

Careturmer ist eine patentierte Lösung, die in Zusammenarbeit mit dänischen Ärzten, Krankenschwestern und Experten entwickelt wurde. Das Produkt wurde 2016 erstmals in dänischen Pflegeheimen eingeführt. Careturner wurde 2017 vom TÜV geprüft und zugelassen.

Careturmer wurde 2018 in der Kategorie Pflege bei Altenpflege in Deutschland zum Start-up des Jahres gewählt und erhielt auch Preise bei der Occupational Therapy Show, UK 2018, und Health & Rehab, Skandinavien 2016.



Scan QR-code and watch product demonstration video



GDV Technology A/S
Værkstedsgården 15, st. th.
DK-2620 Albertslund
Tel. +45 2097 8115
Mail: info@gdvtech.com
www.careturmer.com