

Die einzigartige Lösung für automatische und individuelle Dekubitus-Prävention und sichere Neupositionierung von Patienten




- Individuelle Dekubitusprävention
- Verbessertes Arbeitsumfeld und sicherer Umgang mit Patienten
- Schafft Zeit für eine bessere Pflege
- Reduziert schwere Belastungen für das Personal
- Verbesserung der sensorischen Stimulation für Schlaf und Wohlbefinden

Was ist Careturner?

Careturner® ist eine innovative Lösung zur vollautomatischen, individuellen Dekubitus-Prävention, sowie einer sicheren Patientenhandhabung.

MERKMALE:

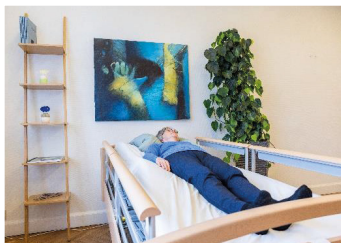

Individuelle Druckprävention

Careturner wird von einem Computer gesteuert und erzeugt weder Geräusche noch Vibrationen, wodurch eine komfortable und sanfte Entlastung der Druckpunkte bei der Umpositionierung des Patienten von einer Seite zur anderen gewährleistet wird.



Sensorische Stimulation

Careturner kann beide Flügel anheben und so den Patienten umhüllen, was eine beruhigende Wirkung hat und den Komfort und das Wohlbefinden optimiert und den Schlaf verbessert.



Sicherer Patientenhandhabung

Der Careturner kann manuell bedient werden und eignet sich daher ideal für das Umpositionieren in einer Arbeitsumgebung mit nur einer Pflegeperson.



Folgt den Bewegungen des Bettes

Careturner ist einfach zu installieren und sorgt dafür, dass alle Funktionen des Bettes weiterhin genutzt werden können, um den optimalen Komfort zu gewährleisten.



Automatische Nutzung des Careturner®


Programmieren Sie zwei Programme zur Dekubitusprävention. Zeit und Winkel für jede Seite können definiert werden. Careturner arbeitet sehr leise und ohne Vibrationen, so dass der Patient ungestört schlafen kann.

- Zeit von 0-180 Min. zwischen jedem Positionswechsel
- Winkel von 0-40°
- Bei Bedarf Entlastung einer Seite möglich (links, rechts oder hinten)
- Gegenhalten von 0-12° auf der gegenüberliegenden Seite reduziert Scherkräfte und gibt ein Gefühl der Sicherheit
- Mit der Timer-Funktion startet der Careturner zur gewünschten Zeit
- Wechseln Sie ohne Wartezeit von der Automatik- zur Pflegefunktion
- 30 Minuten Pausenfunktion ermöglicht eine manuelle Nutzung (danach wechselt es automatisch in das Programm zurück)

Manuelle Nutzung des Careturner®


Ideal für den sicheren Umgang mit Patienten, beim manuellen Drehen eines Patienten, beim Anlegen eines Hebegurts oder bei der Körperpflege.

- Betreiben Sie die Flügel gleichzeitig oder einzeln
- Die Flügel können von 0-80° angehoben werden
- Intelligente Tasten sorgen für einen automatischen Gegenhalt der gegenüberliegenden Seite, um die Scherkräfte zu reduzieren
- Intelligente Tasten bewegen beide Flügel gleichzeitig sorgen für maximalen Komfort und Sicherheit

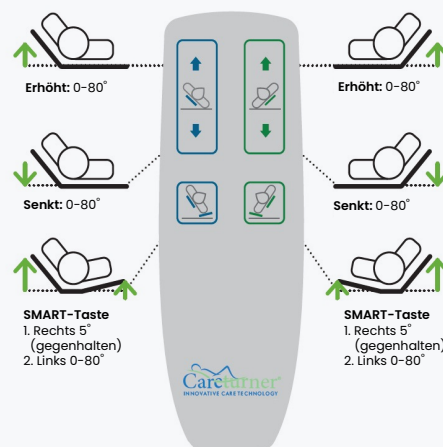

Die Behandlung von Druckgeschwüren ist um ein Vielfaches teurer als Prävention

Druckabbildung 30° mit 9° Gegenhalt

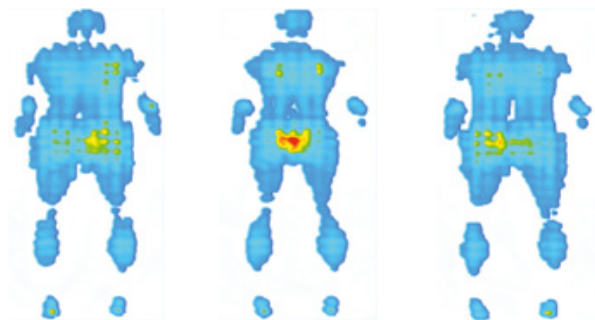


Entlastung der rechten Seite

Careturmer nicht aktiviert

Entlastung der linken Seite


Druckabbildung „die Umarmung“

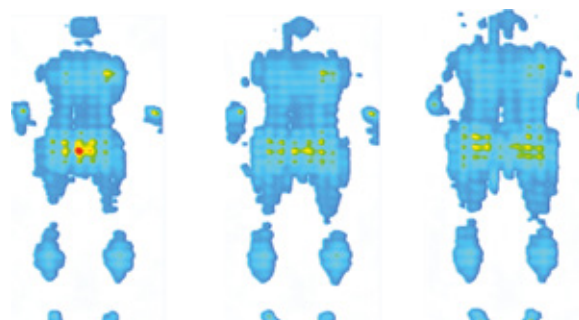

Careturmer nicht aktiviert

15-15°

20-20°

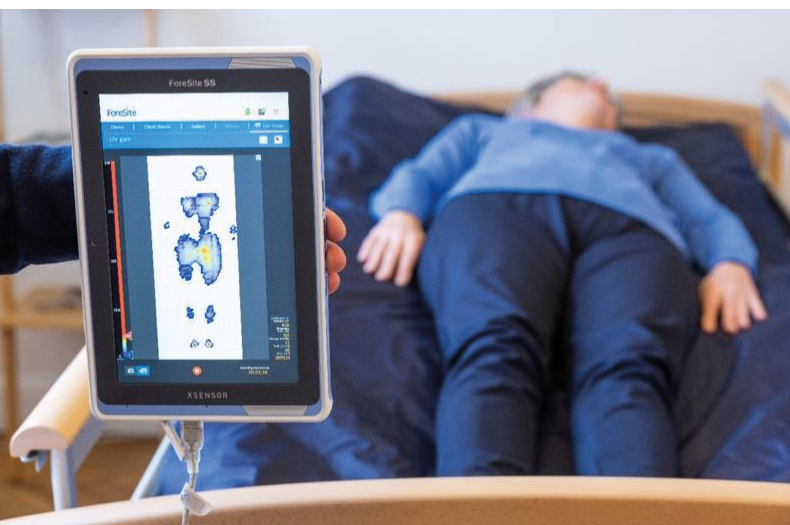

Neueste Erkenntnisse in der Gesundheitstechnologie:

95% aller Patienten müssen nach der Anwendung von Careturner nicht zusätzlich umpositioniert werden.

50% aller Patienten fühlen sich insgesamt ruhiger und können leichter mit Bewegungen und umpositioniert im Bett umgehen.

Der Careturner gilt als eine Technologie, die neue Mitarbeiter im Gesundheitswesen aufmerksam macht und bestehende halten kann.

4 Millionen
Fälle von Menschen, die in Europa an Dekubitus leiden*

Es wird geschätzt, dass 95% klingt sehr hoch, wo ist die Evidenz aller Druckgeschwüre vermeidbar sind Dekubitusprophylaxe Kosten pro Patient/in pro Person Tag bis zu 87€ Kosten für die Behandlung von Dekubitus pro Patient/in pro Person. Tag bis 470€

*Quelle: EPUAP und National Clinical Guideline for the Prevention of Dekubitus

Vorbeugung von Druckgeschwüren mit Careturner® für den Einsatz in den Bereichen



- Demenz
- Heimpflege
- Palliativpflege
- Akutversorgung
- Rehabilitation
- Geriatrische Psychiatrie
- Vorsorge
- Intensivstation

Careturner setzt Ressourcen im Gesundheitswesen frei

VORTEILE DER 3-IN-1-LÖSUNG MIT CARETURNER®



BESSERER KOMFORT UND UNGESTÖRTER SCHLAF

- Verhindert Druckgeschwüre
- Mehr Seelenfrieden und weniger Schmerzen
- Weniger Konflikte zwischen Patient/in und Pflegepersonal



VERBESSERTES ARBEITSUMFELD

- Sicherer Umgang mit dem Patienten
- Weniger schwere Hebevorgänge
- Reduzierte Fluktuation des Pflegepersonals
- Weniger krankheitsbedingte Fehltage



BESSERE RESSOURCENNUTZUNG


- Automatisiertes Drehen spart Ressourcen
- Effiziente Unterstützung der Pflegekraft bei der Mobilisierung
- Zeitersparnis für die Organisation (ROI: 3-4 Monate)
- Intelligenter Prozesse setzen Ressourcen für eine bessere Pflegequalität frei
- Reduziert die Anzahl der Einsätze zur häuslichen Pflege

**13.6 Millionen
Pflegekräfte fehlen
weltweit bis 2030**

** Weltgesundheitsorganisation*

Prognose zur Entwicklung des
Pflegebedarfs weltweit

Anzahl der Menschen in Millionen

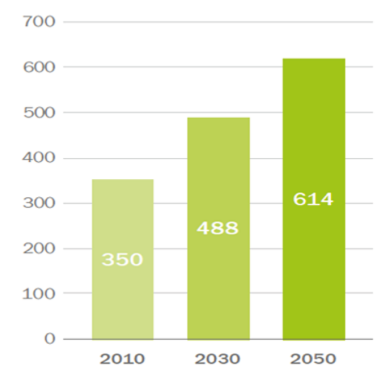

CARETURNER® KANN IN FOLGENDEN BETTENTYPEN VERWENDET WERDEN:

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Sentida 3

Sentida 5

Sentida 6

Sentida 7-i

Sentida SC

Variana

Sentida 5-XL

Sentida 6-XL



Im manuellen:

0-80



Winkel im
Automatikmodus:

0-40



Zeitintervall im
Automatikmodus:

0-180 min



Maximales
Benutzergewicht:

PW 165 Kg.*
SWL 185 Kg.*



Schwerster Teil
des Produktes:

18 kg



Grad kann der blaue
Bezug gewaschen werden:

80

*Die Spezifikationen hängen von den einzelnen Modellen ab



**Careturner
Akademie**

Suchen Sie nach
Tutorials, Anleitungen
und Dokumentationen



Careturner A/S - Lyskær 8B, 2730 Herlev - Denmark +45 20978115

info@careturner.com

www.careturner.com